

LBTEK

EM-CV系列 电动位移台



■ 软件使用说明书

目录

1. 介绍	1
2. 系统要求	1
3. 安装导引	1
3.1 执行安装	1
3.2 运行软件	5
4. 软件功能	6
4.1 连接设备	6
4.2 添加位移台控制器窗口	6
4.2.1 选择位移台类型	7
4.2.2 选择位移台型号	7
4.2.3 选择轴序号	7
4.3 位移台运行控制	7
4.3.1 位移台初始化	8
4.3.2 Move 运行	8
4.3.3 Jog 运行	8
4.3.4 Drive 运行	9
4.3.5 复位	10
4.3.6 停止	10
4.3.7 使能	10
4.3.8 运行中和原点状态	10
4.3.9 轴运行设置	10
4.3.10 循环运行	11
4.4 软件设置	11
4.4.1 语言设置	11
4.5 帮助	12
5. 使用 C/C++ 二次开发	13
5.1 函数列表	13
5.2 函数说明	14
6. 使用 Labview 进行二次开发	22
6.1 在 LabView 中安装 VI	22
6.2 在 Labview 中找到 VI	23
6.3 在 Labview 中使用 VI	23

1. 介绍

本软件配合麓邦技术有限公司的电动位移台系列产品使用。

麓邦技术(LBTEK)是一家从事光学产品的研发、生产和销售的高新技术企业。麓邦产品线包括光学领域科研实验室产品线，微纳光学元件与模组产品线，以及精密光电仪器与设备产品线。目前，麓邦拥有深圳与长沙两个研发与制造中心，分别为深圳市麓邦技术有限公司和长沙麓邦光电科技有限公司。

麓邦秉承着“以光学技术推进科技文明”的使命稳步向前发展，以“成为世界一流的光学产品及解决方案供应商”为奋斗目标，在不断追求卓越的同时，我们时刻坚守着“责任、诚信、团结、进取”的核心价值观，不断“成就客户，创新进取”。麓邦团队是一帮有着大国情怀和民族理想的正能量团队，在国家实施强国战略的大环境下，麓邦将致力打造中国最优秀的产学研相结合的典范和人才培养的摇篮。

EM-CVx 系列控制器是 LBTEK 系列电机控制器的一部分，具有结构紧凑、稳定性高、低速振动小、兼容性好等优点。与其配套的“Mouvement”软件，依托于 Labview，集成绝对运动、相对运动、重复运动、触发开关等功能，为广大的用户提供便利的操作。

2. 系统要求

电动位移台系列上位机软件支持在以下操作系统中安装使用：

Windows7（32bit 和 64bit）

Windows10（32bit 和 64bit）

3. 安装导引

运行 setup.exe，EM_CVx 安装程序将引导您安装软件。

3.1 执行安装

单击“下一步”开始安装 EM_CVx 软件。

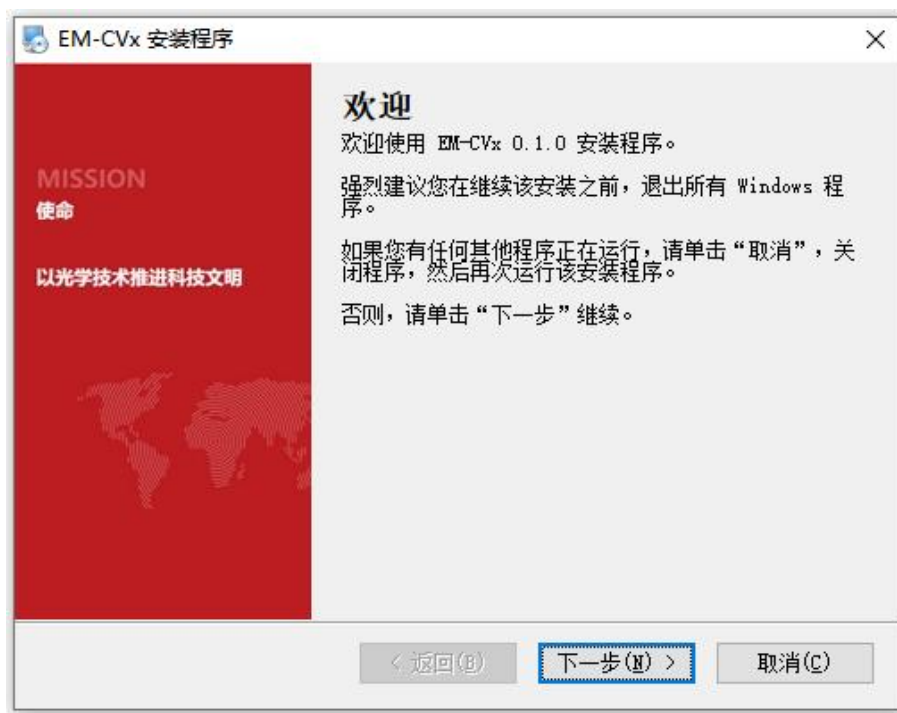


图 3-1 开始安装窗口

开始安装 EM_CVx 软件前，请仔细阅读用户许可授权协议，阅读后可选择同意许可协议条款，点击“下一步”继续安装软件。



图 3-2 用户许可协议界面

单击“下一步”以安装到默认文件夹，或单击“更改”以安装到其他文件夹。

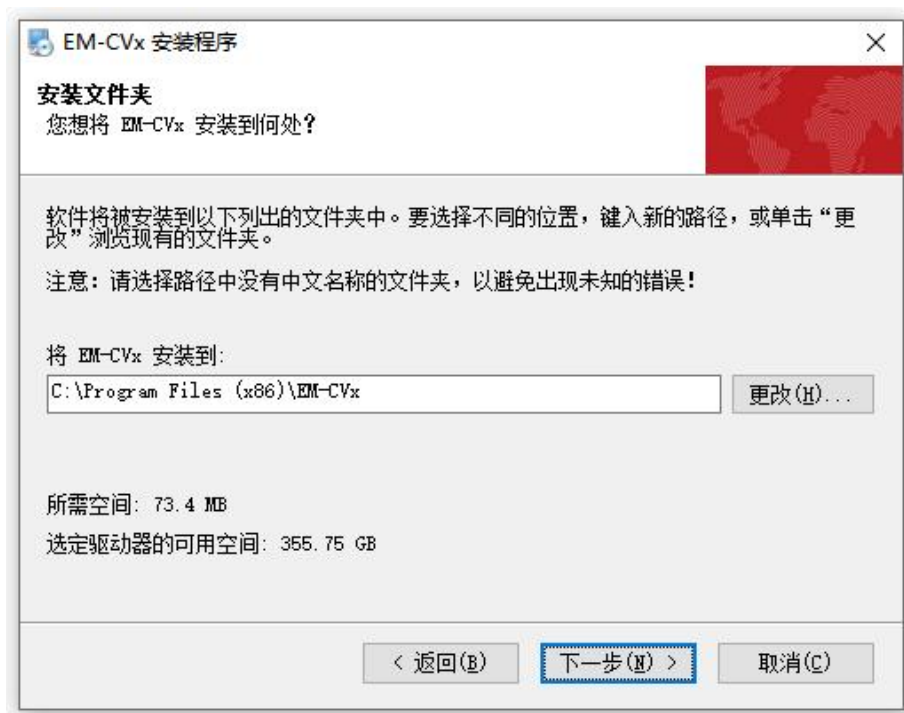


图 3-3 选择安装目录界面

您可以使用默认的快捷方式文件夹安装，或者编辑文件夹使用您自定义的快捷方式文件夹。同时可以选择只对当前用户安装快捷方式或者使快捷方式对所有用户可用。单击“下一步”继续安装。



图 3-4 选择快捷方式

在如下界面检查安装信息，单击“下一步”继续安装程序。



图 3-5 检查安装信息

安装即将开始，可能需要您稍作等候。如果要停止安装，请单击“取消”按钮。

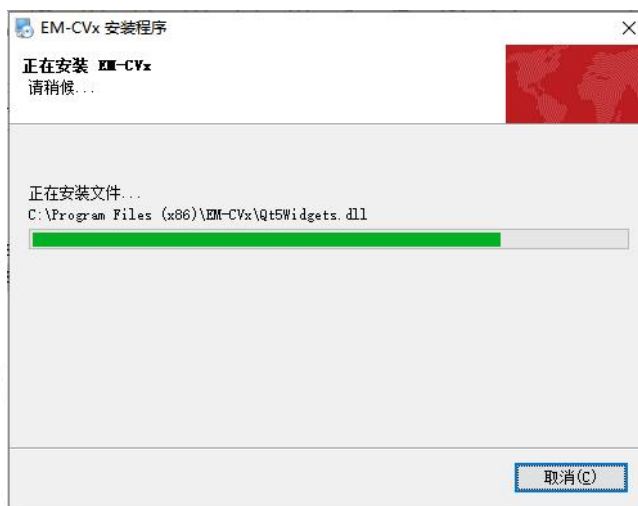


图 3-6 正在安装

等待文件安装完成后，界面会提示您安装成功，至此安装结束。单击“完成”以推出安装程序。

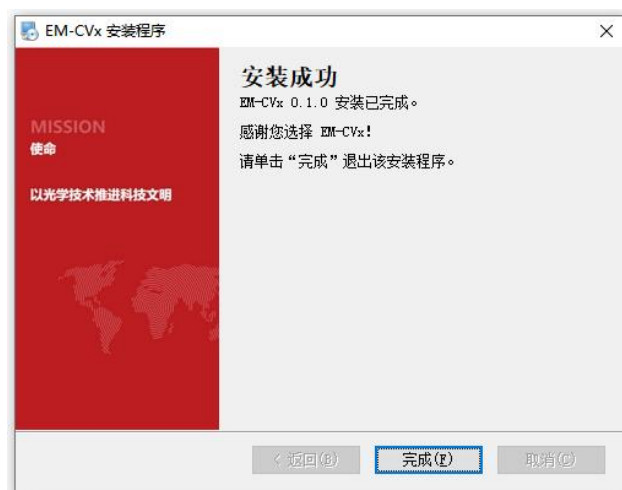


图 3-7 安装完成

3.2 运行软件

完成安装后，可以通过以下步骤在设备管理器中找到已连接的 EM_CVx 系列控制器设备。

步骤一：打开设备管理器；

步骤二：查找连接到设备的串行口，例如：virtual COM Port(COM10)



图 3-8 查找设备串口号

完成安装后您可以在开始菜单中找到软件图标或者使用桌面快捷方式启动软件。



图 3-9 软件图标

软件启动后界面如下

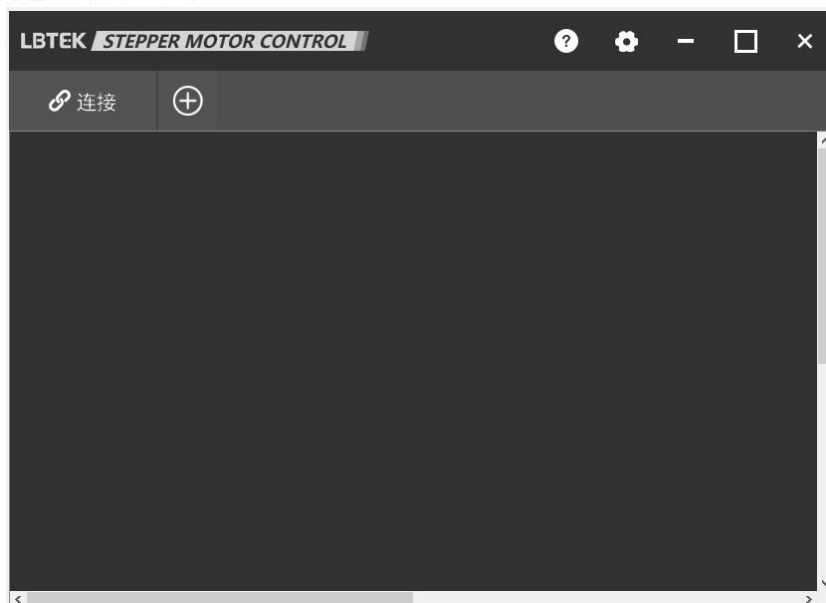


图 3-10 软件主界面

4. 软件功能

4.1 连接设备

在主界面点击“连接”按钮打开连接设备窗口。在连接设备窗口中选择可以选择设备进行连接和断开操作。

在串口选择列表中选择设备对应的串口，点击连接按钮连接设备。

设备连接成功时，消息栏提示“设备已连接”。设备连接失败时消息栏会提示设备连接失败。

设备在已连接状态时，点击“断开”按钮断开设备连接，消息栏会提示“设备已断开”。



图 4-1 连接设备

4.2 添加位移台控制器窗口

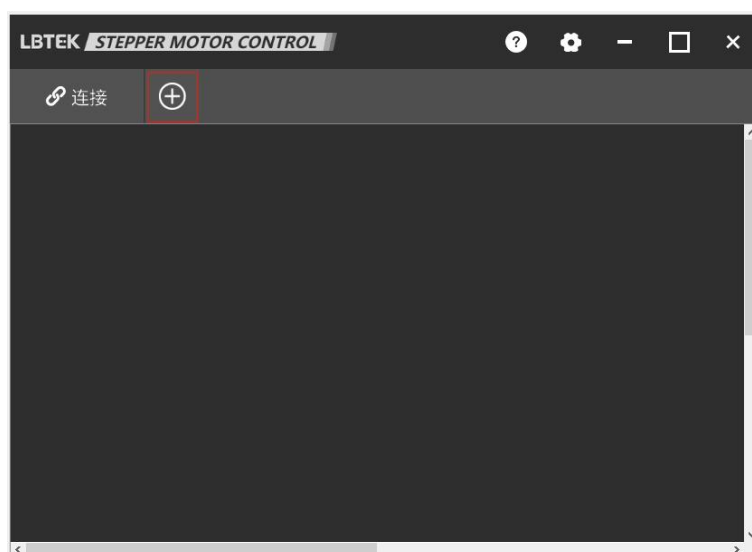


图 4-2 添加位移台控制器窗口

在主界面点击“添加”按钮，打开添加控制器窗口。在添加控制器窗口中选择位移台类型和

轴序号后点击“确定”按钮添加轴控制窗口。



图 4-3 添加位移台控制器窗口

4.2.1 选择位移台类型

位移台分为直线位移台、旋转位移台和角位移台三种类型，点击按钮可以切换位移台类型，筛选设备型号数据。

4.2.2 选择位移台型号

在设备型号下拉框中可以选择位移台的型号。请选择正确的位移台型号，错误的型号可能导致设备无法正常运行或者其他未知的错误。

4.2.3 选择轴序号

在轴序号下拉框中可已选择位移台的轴序号，轴序号应当和设备连接的接口序号一致。请选择正确的轴序号，错误的轴序号可能导致设备无法正常运行或者其他未知的错误。

4.3 位移台运行控制

添加位移台控制窗口完成后，可以开始对位移台进行移动、步进运行、推进、循环运行等操作。界面显示如下：



图 4-4 位移台参数初始化

4.3.1 位移台初始化

添加位移台控制窗口后，查看初始化结果，成功提示“初始化运动轴参数成功”。如果提示“初始化运动走参数出错”，请检查位移台和控制器是否正确连接，位移台型号和轴序号是否正确。

4.3.2 Move 运行

Move: 绝对运动，依据位置（绝对位置）、速度、加速度参数，进行运动，移动到设置的位置。

参数设置: 点击移动参数设置按钮，打开移动参数设置窗口，设置位置、速度、加速度，点击确认按钮设置参数，点击还原按钮将参数还原到上一次设置的参数数据。

示例: 如下图所示，以旋转位移台为例，界面中显示当前位置为 0° ，设置位置为 20° 。点击 Move 按钮 ，位移台将从 0° 处移动到 20° 位置。运动过程中界面右下角的指示灯“运行中”指示灯亮起，结束运动时“运行中”指示灯熄灭。



图 4-5 Move 运行

4.3.3 Jog 运行

Jog: 步进运动，依据步长、步进次数、步进延时参数，进行运动，逐次按步长和延时而向指定方向前进设定的次数。

步长: 每一次运动的相对距离；

步进次数: 前进的次数；

步进延时: 每两次前进之间的延时时间；

参数设置: 点击步进参数设置按钮，打开步进参数设置窗口，设置步进步长、步进次数和步进延时，点击确认设置参数，点击还原按钮将参数还原到上一次设置的数据。

示例: 如下图所示，界面中显示当前位置为 0mm，设置步长为 1mm，步进次数为 5 次，步进延时为 1000ms。点击 Jog 按钮 ，位移台将向正方向步进 5 次，每次前进 1mm，每

两次运行之间延时 1000ms。运动过程中界面右下角的指示灯“运行中”指示灯亮起，结束运动时“运行中”指示灯熄灭。



图 4-6 Jog 运行

4.3.4 Drive 运行

Drive: 相对运动，依据相对位移、速度、加速度参数进行运动，向前移动一段距离。

参数设置: 点击 Drive 参数设置按钮，打开 Drive 参数设置窗口，设置相对位移、速度和加速度，点击确认设置参数，点击还原按钮将参数还原到上一次设置的数据。

相对位移使能: 您可以选中或取消选中“相对位移”参数来决定是否使用“相对位移”参数。使用“相对位移”参数运行 Drive 时，位移台前进设定的位移量后停止。不使用“相对位移”参数运行 Drive 时，位移台将一直前进直到被停止或者触发限位信号。

示例: 如下图所示，界面中显示当前位置为 10mm，设置相对位移为 3mm。点击 Drive 按钮，位移台将从 3 mm 处移动到 13mm 位置。运动过程中界面右下角的指示灯“运行中”指示灯亮起，结束运动时“运行中”指示灯熄灭。



图 4-7 Drive 运行

4.3.5 复位

点击复位按钮，位移台将回到原点位置

4.3.6 停止

点击停止按钮，位移台立即停止运行。

4.3.7 使能

点亮使能按钮，您可以使用手动调节的方式调整位移台位置。

熄灭使能按钮，电机带电保持，不能使用手动调节。

4.3.8 运行中和原点状态

在位移台运行时，“运行中”状态指示灯点亮，位移台停止时，“运行中”状态指示灯熄灭。

当位移台在原点位置时，“原点”状态指示灯点亮，当位移台不在原点位置时，“原点”状态指示灯熄灭。

4.3.9 轴运行设置

点击位移台控制窗口设置按钮，打开位移台设置界面，在这里可以设置外部输入输出状态。

选择输入有效，控制器将接收外部输入。选择输出有效，控制器将输出 TTL 信号。您可以通过取消选中来关闭输入输出。



图 4-8 轴运行设置

4.3.10 循环运行

在位移台设置界面可以打开循环运行窗口。循环运行将使用推进运行的速度、加速度和位移量参数，您可以设置循环的次数。

点击正方向运行按钮，位移台从正方向开始循环运行。

点击负方向运行按钮，位移台从负方向开始循环运行。

点击停止按钮，循环结束。



图 4-9 循环运行

4.4 软件设置

4.4.1 语言设置

软件支持中文和英文显示，点击软件设置按钮，打开设置窗口，点击“语言”按钮打开语言设置界面，选择中文或者英文可以实时切换界面显示的语言。

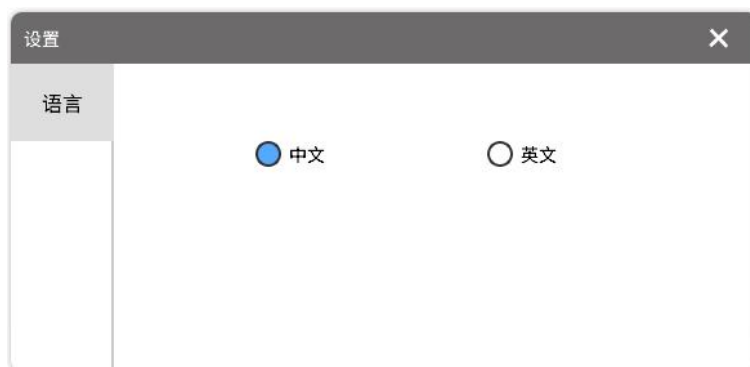


图 4-10 软件设置

4.5 帮助

在帮助界面中可以查看软件的基本信息，还可以打开查看说明手册、SDK 目录和了解更多详细信息。



图 4-11 帮助

手册：点击查看可打开软件使用说明文件

SDK：点击查看 C++ SDK 自动打开 C++ SDK 所在目录，点击查看 LabView SDK 自动打开 LabView SDK 所在目录

了解更多详细信息：打开麓邦商城了解更多产品信息或联系我们。

5. 使用 C/C++ 二次开发

用户可以基于 C++ SDK 对设备进行二次开发，支持的文件位于 \\help\\LBtek_mover_C++SDK 目录中，您可以根据需要选择使用 x64 或 x86 中的 dll 文件。

添加头文件到项目，将 dll 加载到项目，dll 文件和配置文件需要放在同一级目录。

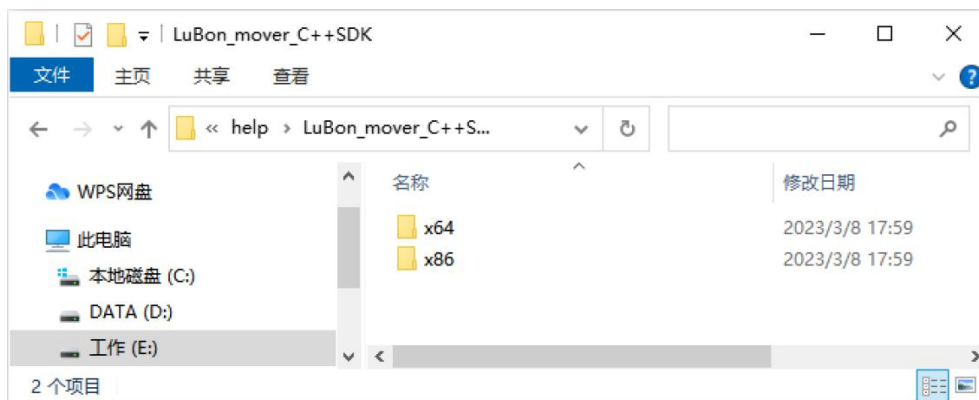


图 5-1 C/C++二次开发包目录

5.1 函数列表

```
DLL_EXPORT int listPorts(char *serialNo, unsigned int len);
DLL_EXPORT int open(char *serialNo);
DLL_EXPORT int isOpen(char *serialNo);
DLL_EXPORT int close(int handle);
DLL_EXPORT int move(int handle, int ID, int func);
DLL_EXPORT int setSpeed(int handle, int ID, float speed);
DLL_EXPORT int setAcceleration(int handle, int ID, float Acc);
DLL_EXPORT int setAbsoluteDisp(int handle, int ID, float disp);
DLL_EXPORT int setRelativeDisp(int handle, int ID, float disp);
DLL_EXPORT int setJogTime(int handle, int ID, int time);
DLL_EXPORT int setJogStep(int handle, int ID, float step);
DLL_EXPORT int setJogDelay(int handle, int ID, int delay);
DLL_EXPORT int setInputEnable(int handle, int ID, int enable);
DLL_EXPORT int setOutputEnable(int handle, int ID, int enable);
DLL_EXPORT int setAxisEnable(int handle, int ID, int enable);
DLL_EXPORT int setRelativePosEnable(int handle, int ID, int enable);
DLL_EXPORT int getDoingState(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getPositiveLimitEnable(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getNegativeLimitEnable(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getOriginEable(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getDeviceCode(int handle);
DLL_EXPORT float getSpeed(int handle, int ID);
DLL_EXPORT float getAcceleration(int handle, int ID);
```

```

DLL_EXPORT float getAbsoluteDisp(int handle, int ID);
DLL_EXPORT float getRelativeDisp(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getJogTime(int handle, int ID);
DLL_EXPORT float getJogStep(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getJogDelay(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getAxisType(int handle, int ID);
DLL_EXPORT float GetCurrentPos(int handle, int ID, int *ok);
DLL_EXPORT int getInputEnable(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getOutputEnable(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getAxisEnable(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getRelativePosEnable(int handle, int ID);
DLL_EXPORT int getAllModels(char* modelName, int len);
DLL_EXPORT int initAxis(int handle, int ID, char* model);
DLL_EXPORT int getErrorCode(int handle, int ID);

```

5.2 函数说明

DLL_EXPORT int listPorts(char *serialNo, unsigned int len)

说明：获取当前电脑所有已连接的串口设备名称列表

参数：

serialNo	设备名称列表（出参，名称使用逗号隔开）
lenlen	字符串的最大长度

返回值：成功返回串口设备数量，失败返回负数。

DLL_EXPORT int open(char *serialNo)

说明：打开串口设备

参数：

serialNo	串口设备名称
-----------------	--------

返回值：成功返回串口设备的句柄，失败返回负数。

DLL_EXPORT int isOpen(char *serialNo)

说明：检查串口设备是否已经被打开

参数：

serialNo	串口设备名称
-----------------	--------

返回值：串口已被打开返回 0x01，串口没有被打开返回 0x00，出错返回负数。

DLL_EXPORT int close(int handle)

说明：关闭串口设备

参数：

handle	串口设备句柄
---------------	--------

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int move(int handle, int ID, int func)

说明：运行设备

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
func	功能码 0x01 停止 0x02 回原点 0x04 正方向推进运动 0x05 负方向推进运动 0x06 移动到指定位置 0x07 正方向步进运动 0x08 负方向步进运动

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setSpeed(int handle, int ID, float speed)

说明：设置运行速度

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
speed	运行速度

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setAcceleration(int handle, int ID, float Acc)

说明：设置运行时的加速度

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
Acc	运行时的加速度

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setAbsoluteDisp(int handle, int ID, float disp)

说明：设置移动时的绝对位移量

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
disp	移动时的绝对位移量

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setRelativeDisp(int handle, int ID, float disp)

说明：设置推进运行时的相对位移量

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
disp	推进运行时的相对位移量

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setJogTime(int handle, int ID, int time)

说明：设置步进运行时的步进次数

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
time	步进运行时的步进次数

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setJogStep(int handle, int ID, float step)

说明：设置步进运行时的步进步长

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
time	步进运行时的步进步长

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setJogDelay(int handle, int ID, int delay)

说明：设置步进运行时的延时时间

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
time	步进运行时的延时时间(ms)

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setInputEnable(int handle, int ID, int enable)

说明：设置外部输入有效

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
enable	0x00 外部输入无效 0x01 外部输入有效

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setOutputEnable(int handle, int ID, int enable)

说明：设置外部输出有效

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
enable	0x00 外部输出无效 0x01 外部输出有效

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setAxisEnable(int handle, int ID, int enable)

说明：设置位移台轴使能

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
enable	0x00 位移台轴未使能状态 0x01 位移台轴使能状态

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int setRelativePosEnable(int handle, int ID, int enable)

说明：设置推进运行时的相对位置值使能，未使能时，推进运行不使用设置的位移量一直运行直到停止或者触发限位。

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
enable	0x00 相对位置值未使能 0x01 相对位置值使能

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int getDoingState(int handle, int ID)

说明：获取位移台运行状态

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回运行状态（0x00 未运行；0x01 正在运行中），失败返回负数。

DLL_EXPORT int getPositiveLimitEnable(int handle, int ID)

说明：获取位移台正方向限位状态

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回位移台正方向限位状态（0x00 不在限位位置；0x01 在限位位置），失败返回负数。

DLL_EXPORT int getNegativeLimitEnable(int handle, int ID)

说明：获取位移台负方向限位状态

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回位移台负方向限位状态（0x00 不在限位位置；0x01 在限位位置），失败返回负数。

DLL_EXPORT int getOriginEable(int handle, int ID)

说明：获取位移台原点传感器状态

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回位移台原点传感器状态（0x00 不在原点位置；0x01 在原点位置），失败返回负数。

DLL_EXPORT int getDeviceCode(int handle)

说明：获取位移台控制器代码（控制器支持的最大轴数量）

参数：

handle	串口设备句柄
--------	--------

返回值：成功返回位移台控制器代码（控制器支持的最大轴数量），失败返回负数。

DLL_EXPORT float getSpeed(int handle, int ID)

说明：获取位移台的运行速度

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回位移台的运行速度，失败返回负数。

DLL_EXPORT float getAcceleration(int handle, int ID)

说明：获取位移台的运行加速度

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回位移台的运行加速度，失败返回负数。

DLL_EXPORT float getAcceleration(int handle, int ID)

说明：获取位移台的运行加速度

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回位移台的运行加速度，失败返回负数。

DLL_EXPORT float getAbsoluteDisp(int handle, int ID)

说明：获取位移台移动的绝对位移参数

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回位移台移动的绝对位移参数，失败返回负数。

DLL_EXPORT float getRelativeDisp(int handle, int ID)

说明：获取位移台移动的相对位移参数

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回位移台移动的相对位移参数，失败返回负数。

DLL_EXPORT int getJogTime(int handle, int ID)

说明：获取位移台步进运行的步进次数

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回步进次数参数，失败返回负数。

DLL_EXPORT float getJogStep(int handle, int ID)

说明：获取位移台步进运行的步长参数

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回步进步长参数，失败返回负数。

DLL_EXPORT int getJogDelay(int handle, int ID)

说明：获取位移台步进运行的延时参数

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回步进延时参数，失败返回负数。

DLL_EXPORT int getAxisType(int handle, int ID)

说明：获取位移台轴类型

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回轴类型（0x00：直线，0x01：旋转），失败返回负数。

DLL_EXPORT float GetCurrentPos(int handle, int ID, int *ok)

说明：获取位移台的当前位置

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回当前位置，失败返回负数。

DLL_EXPORT int getInputEnable(int handle, int ID)

说明：获取位移台的输入使能参数

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回输入使能参数（0x00：未使能，0x01：已使能），失败返回负数。

DLL_EXPORT int getOutputEnable(int handle, int ID)

说明：获取位移台的输出使能参数

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回输出使能参数（0x00：未使能，0x01：已使能），失败返回负数。

DLL_EXPORT int getAxisEnable(int handle, int ID)

说明：获取位移台的轴使能参数，轴使能时电机带点保持，不能手动调试。轴未使能时，电机关闭保持，此时可进行手动调节。

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回轴使能参数（0x00：未使能，0x01：已使能），失败返回负数。

DLL_EXPORT int getRelativePosEnable(int handle, int ID)

说明：获取位移台的相对位置值使能参数，未使能时，推进运动不使用设置的相对位移量，将一直运行到被停止或者触发限位信号。

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回相对位置值使能参数（0x00：未使能，0x01：已使能），失败返回负数。

DLL_EXPORT int getAllModels(char* modelName, int len)

说明：获取所有位移台型号名称，用","隔开

参数：

modelName	支持的位移台型号名称（出参）
ID	轴序号

返回值：成功返回支持的型号数量，失败返回负数。

DLL_EXPORT int initAxis(int handle, int ID, char* model, int AxisCount)

说明：初始化轴设备

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号
model	位移台型号名称
AxisCount	控制器支持的轴数量（可以通过 <i>getDeviceCode</i> 获得）

返回值：成功返回 0x00，失败返回负数。

DLL_EXPORT int getErrorCode(int handle, int ID)

说明：获取错误码

参数：

handle	串口设备句柄
ID	轴序号

返回值：成功返回非负数的错误码，失败返回负数。

0：无错误；

9025：轴参数错误（出现轴参数错误时，不能继续运行，需要重启控制器恢复）

6. 使用 Labview 进行二次开发

用户可以基于 LabVIEW 仪器驱动机制使用 LabVIEW 2013 或更高版本的软件开发。支持的文件位于\help\LuBon_EM_CVx_LabViewSDK 目录中。

6.1 在 LabView 中安装 VI

可以在软件的帮助页面中点击“查看 Labview SD”打开\LuBon_EM_CVx_LabViewSDK 目录，将 LBtek_EM_CVx 文件夹复制到 LabVIEW 安装目录的 instr.lib 文件夹下。

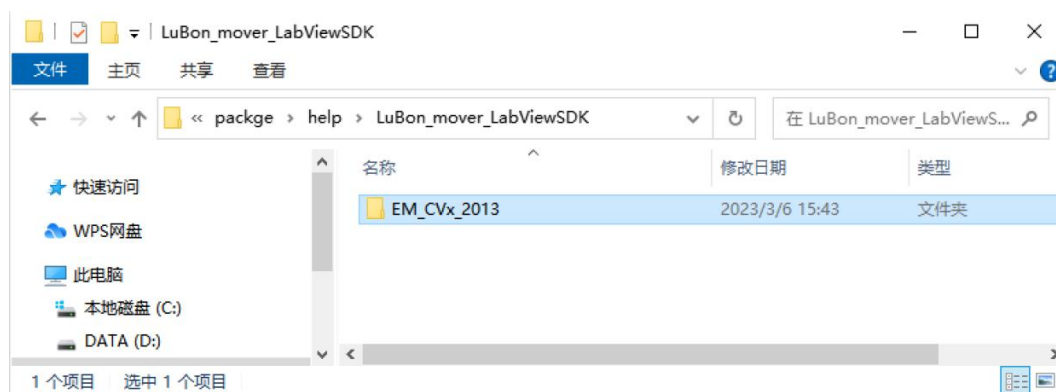


图 6-1 LabView 二次开发目录

目标文件夹：%LabVIEW install path%\instr.lib，通常在：C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2013\instr.lib

注意：SDK 兼容 LabVIEW 2013 或更高版本。

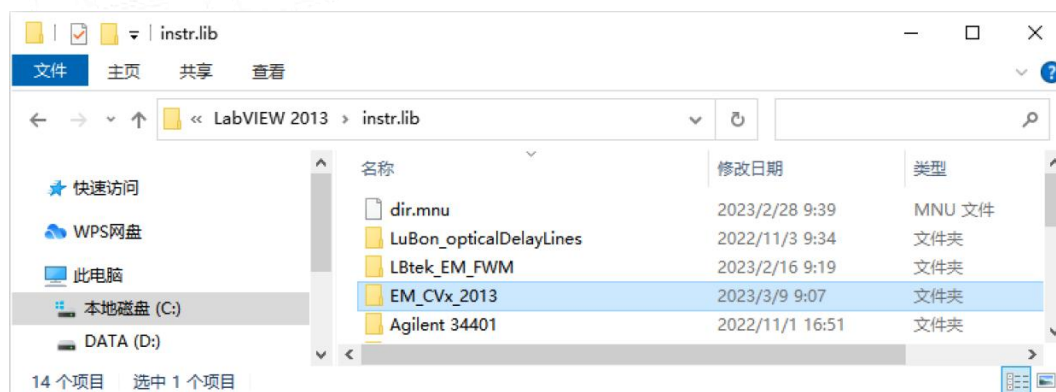


图 6-2 LabView 安装 VI

6.2 在 Labview 中找到 VI

Labview 中 VI 可以在这里找到：Functions\Instrument I/O\Instrument Drivers\

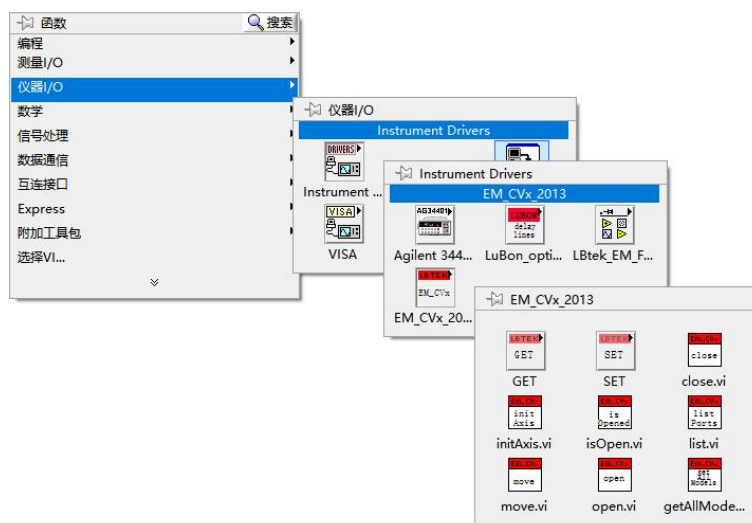


图 6-3 LabView 中的位移台选板

6.3 在 Labview 中使用 VI

参考示例程序：

在路径：\LuBon_EM_CVx\Example 下提供了一个示例程序，展示了 Labview 二次开发包的参考用法。您可以通过示例程序连接控制器运行简单的位移台控制指令。

注意：在运行示例程序前，请确保您的设备已经连接到电脑。

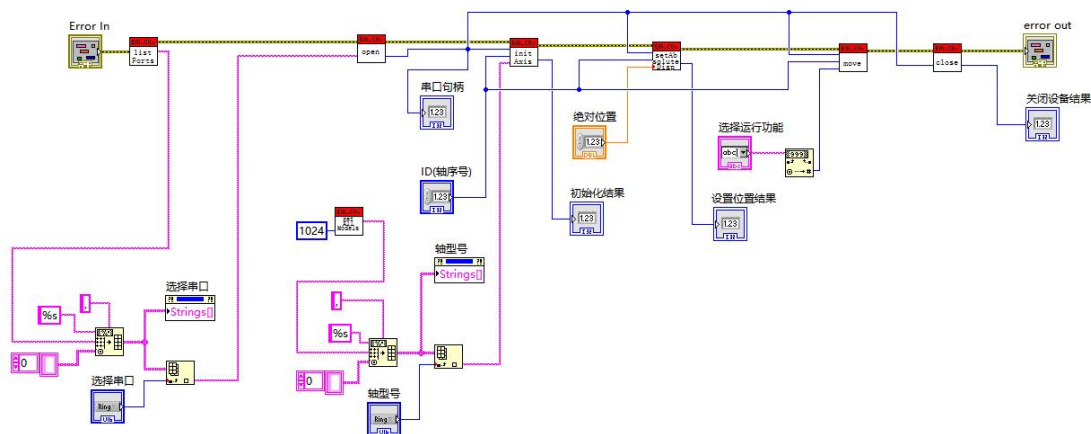


图 6-4 LabView 开发示例



欢迎关注麓邦公众号

产品上新/商城活动/技术文章/展会会议

麓邦商城 — 您身边的光电实验好帮手!

www.lbtek.com |

400-060-6986

— 深圳总部

深圳市麓邦技术有限公司

Shenzhen LUBON Technology Co., Ltd.

地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座2103

电话：400-060-6986

官网：www.lubon.com

邮箱：sales@lubon.com

— 长沙总部

长沙麓邦光电科技有限公司

Changsha LUBANG Photonics Technology Co., Ltd.

地址：长沙市岳麓区环创企业广场A6栋

电话：400-060-6986

官网：www.lbtek.com

邮箱：service@lbtek.com ; sales@lbtek.com